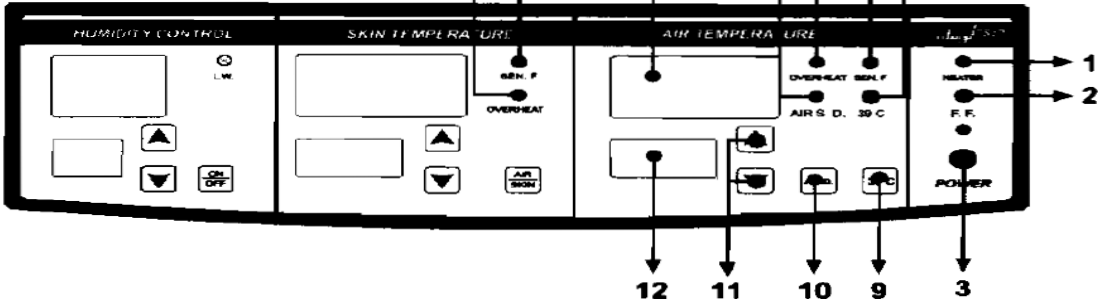


تاریخ: 93/7/26 بخش: بستری زنان	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ايجرود
دستورالعمل استفاده از دستگاه انکوباتور	
شماره سریال: 1110000655 مدل دستگاه: 111 شرکت فروشنده: توسان مارک دستگاه: توسان شماره شناسایی: 910096	
14 13 8 7 6 5 4  ۱ - نشانگر کارکرد هیتر ۲ - نمایشگر قطع گردش هوا ۳ - کلید خاموش و روشن و نشانگر آن ۴ - نشانگر کار در حالت ویژه ۵ - نشانگر اختلال در مدار سنسور هوا ۶ - نشانگر دمای بیش از حد داخل محفظه ۷ - نشانگر انحراف درجه حرارت از میزان دمای تنظیم شده ۸ - نمایشگر دمای محفظه ۹ - کلید انتخاب حالت ویژه (تنظیم دما تا ۳۹ درجه سانتیگراد) ۱۰ - کلید قطع هشدار صوتی انحراف دما ۱۱ - کلیدهای تنظیم دمای محفظه ۱۲ - نمایشگر دمای تنظیمی هوای محفظه ۱۳ - نشانگر اختلال در مدار سنسور پوستی ۱۴ - نشانگر دمای بیش از حد بدن نوزاد	